

GUIDA PRATICA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI TIPOLOGIA DISPOSITIVI

myobrace®

PASSIVA
(Utilizzo notturno)

myosa®

■ PERCHÉ SCEGLIERE MYOBRACE (PASSIVO)

In presenza di abitudini miofunzionali viziate:

- errata posizione della lingua a riposo
- respirazione orale
- deglutizione atipica
- suzione del pollice

■ COME SCEGLIERE IL TIPO DI MYOBRACE

- **sviluppo dentizione primaria:** MYOCHEW
- **dentizione decidua:** serie J (J1-J2-J3)
- **dentizione mista:** serie K (K1-K2-K3)
- **dentizione permanente:** serie T (T1-T2-T4)
- **dentizione permanente (15 anni+):** serie A (A1-A2-A3)
- **Classe III dentizione mista - o set 1.5 mm:**
serie I-3 (I3N- I3-I3H)
- **Classe III dentizione mista/permanente - o set 3 mm:**
serie P-3 (P3N-P3-P3H)

■ PERCHÉ SCEGLIERE MYOSA (PASSIVO)

In presenza di disturbi respiratori del sonno:

- iperventilazione orale
- russamento

■ COME SCEGLIERE IL TIPO DI MYOSA

• Da 3 a 15 anni

con BASSO BFT e BHT ≤ 25 sec.: **KS1**
con BUON BFT e BHT > 25 sec.: **KS2**

• Oltre 15 anni

con BHT ≤ 20 sec.: **S1H**
con BHT $> 20 \leq 30$ sec.: **S1**
con BHT > 30 sec.: **S2**
Stabilizzazione con BHT ≥ 45 sec.: **S3**

■ COME UTILIZZARE I DISPOSITIVI MYOBRACE

Per ogni serie ci sono 3 FASI:

FASE 1

Dispositivo morbido in silicone medicale autoclavabile.

Il paziente impara **posizione corretta della lingua** e **respirazione nasale**.

Per pazienti in dentizione mista respiratori orali utilizzare K0 al posto del K1.

FASE 2

Dispositivo in silicone medicale con all'interno Dynamicore.

Continua la **correzione** delle **abitudini viziate** e favorisce lo **sviluppo dell'arcata**.

Se necessita un maggiore ampliamento, utilizzare arco BWS con dispositivo congiunto (T1-bws)

FASE 3

Dispositivo rigido.

Continua la **correzione** delle abitudini viziate nella **fase ritentiva**.

OPZIONALE - FASE INTERMEDIA SOLO PER SERIE T DOPO LA FASE 2:

Dispositivo in silicone medicale con all'interno Dynamicore e alloggiamento per i denti.

Continua la correzione delle abitudini viziate e favorisce l'allineamento dentale **T3** (unico dispositivo in 7 misure)

GUIDA PRATICA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI TIPOLOGIA DISPOSITIVI

myoTAREA®

ATTIVA
(Utilizzo diurno per eseguire gli esercizi)



□ PERCHÉ SCEGLIERE MYOTALEA (ATTIVO)

- Per esercitare lingua, labbra e muscolatura: TLJ
- Per esercitare lingua, labbra e muscolatura su pazienti con i brackets: TLJB
- Per esercitare muscolatura labiale: LIP TRAINER e TLP


□ QUALE TIPO DI MYOBRACE CON ALLINEATORI: (PASSIVO) • Tutti i dispositivi di Fase 1



Serie K (K1)



Serie T (T1)

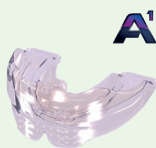

Serie A (A1)




Serie I-3 (I3N)



Serie P-3 (P3N)


□ QUALE TIPO DI MYOBRACE CON BRACKETS: (PASSIVO) • Serie B (B1 – B2 – B3)

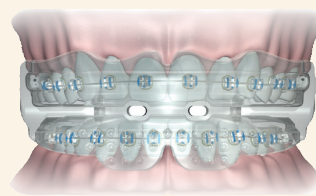

□ COME SCEGLIERE LA MISURA:

Con misuratore di carta:

Misura distale da laterale a laterale superiore.
Riesce a dare una misura in linea di massima,
ma non dà l'effettiva misura dell'arcata.

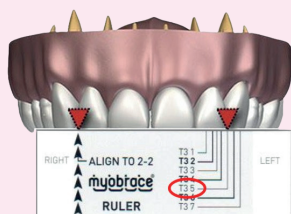

Con set di misurazione:

Nel set sono presenti dispositivi di Fase 1 (autoclavabili)
per le diverse serie e nelle diverse misure.
Azzera la possibilità di errore; se in dubbio, scegliere
la misura più grande.



Set misurazione
Include 8 dispositivi